















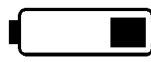
















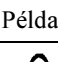


M2720A Avalon CTS vezeték nélküli magzati transzducerrendszer

Figyelmeztetések és teendők

Az alapegység figyelmeztetései:  – villog önmagában vagy bármelyik oldali jelzőfénnel együtt.  – a lámpa vagy nem világít, vagy folyamatosan világít.

 – hangjelzést jelent, ha a rendszer úgy van beállítva. Elnémításához nyomja meg a  gombot.

A transzducer figyelmeztetései:  – a lámpa együtt villog a probléma forrását jelző szimbólummal.

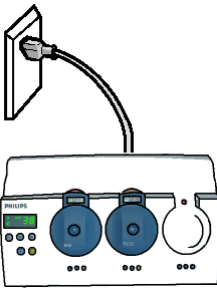
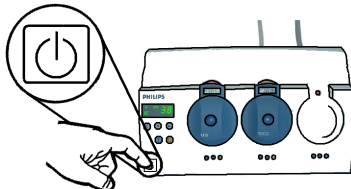

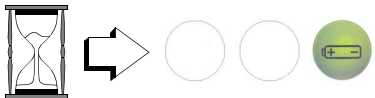
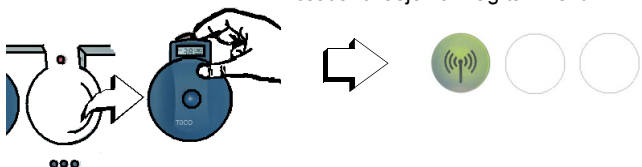
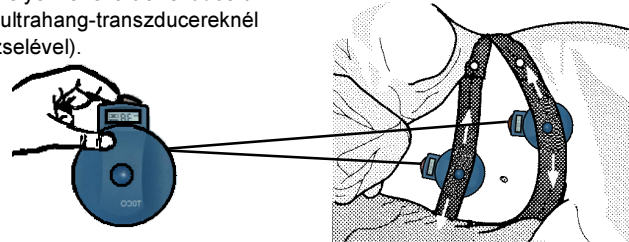

Figyelmeztetés		Teendők
Az alapegységen	A transzduceren	
   + 		Az akkumulátor töltéséhez dokkolja a transzducert, vagy csatlakoztasson egy feltöltött transzducert.
   + 	 + 	Ha a probléma 30 percnyi töltés után továbbra is fennáll, cserélje ki a transzducer akkumulátorát. (Lásd: <i>Service Guide</i> .)
   + 		Ellenőrizze, hogy a transzducer működik és hatótávolságon belül van-e. Ellenőrizze az antenna csatlakozását.
  	 + 	Nyomja meg két másodpercre a  gombot a blokkolt aljzat feloldásához.
 Példa ágyazonosítóra	 +  + --	Ehhez az aljzathoz már kapcsolódik egy <b>aktív</b> transzducer (38-as ágyazonosító a példában).
 Példa ágyazonosítóra	 +  + 16	Vagy dokkolja előbb a jelzett transzducert az aljzat elérhetővé tételéhez, vagy, ha a transzducerhez ágyazonosító is tartozik (a példában 16), tegye vissza a transzducert a saját alapegységére.
	 + -- --	Hívja az ügyfélszolgálatot. (Nem sikerült regisztrálni a transzducert.)
	 + 	Ha az EKG-transzducer működik, csatlakoztassa a kábelt. Tegye a transzducert a ponttal jelölt helyzetű dokkolóaljzatra (a transzducer nem a megfelelő aljzatban van).


Az alapegység és a transzducer hibaüzenetei (E0–E9): Lásd a *Használati útmutatót*.




# M2720A Avalon CTS vezeték nélküli magzati transzducerrendszer

## Rövid útmutató

- 1 110–240 VAC  

- 2 Kapcsolja be a rendszert.  

- 3 **TELE**  
Ellenőrizze, hogy a magzati monitoron megjelenjen a „TELE” üzenet, az Avalon CTS rendszerrel való megfelelő kapcsolatot jelezve.  

- 4 Várjon, amíg a Kész lámpa világítani kezd.  

- 5 Vegye ki a transzducert.  
A Kész lámpa kialszik, az RF csatlakozásjelző világítani kezd.  

- 6 Helyezze fel a transzducert (ultrahang-transzducereknél zselével).  
  
Rögzítse a transzducert, amikor jó jelet fog:  
  
– Avalon monitorok.      – 50-es sorozat.

Átváltás ultrahangról DEKG-monitorozásra	
1	Dokkolja az ultrahang-transzducert.
2	Vegye ki az EKG-transzducert, ha az adott aljzat  lámpája zölden világít.
3	Csatlakoztassa a DEKG-csatlakozókábelt és a magzati fejtető-elektrodákat az EKG-transzducerhez.
4	Kezdje meg a DEKG-monitorozást.

Átváltás DEKG-ről ultrahang-monitorozásra	
1	Húzza ki a DEKG-csatlakozókábelt és a magzati fejtető-elektrodákat az EKG-transzducerből.
2	Dokkolja az EKG-transzducert.
3	Vegye ki az ultrahang-transzducert, ha az adott aljzat  lámpája zölden világít.
4	Kezdje meg az ultrahangos monitorozást.

Az Avalon CTS használatának megkezdése előtt húzza ki a monitorból az összes vezetékes magzati transzducer csatlakozóját.

Ha egyszerre két aktív transzducer is közvetít FHR-jeleket egy adott alapegységnek, az E9 hibaüzenet jelenik meg. A hibaüzenet eltüntetéséhez dokkolja a szóban forgó transzducerek egyikét.

**Használat után tisztítsa meg a transzducereket, majd dokkolja azokat az alapegység megfelelő aljzatában.**